

# ERSTE HILFE LÖSUNGEN FÜR DEN ARBEITSPLATZ



Labworld.at Laborgeräte - Glas - Reagenzien Mikrobiologie - Hygienekontrolle Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7 Email: office@labworld.at



# Schützen Sie Ihre Mitarbeiter Statten Sie Ihren Arbeitsplatz richtig aus

Ein schneller und einfacher Zugang zur Ersten Hilfe hält Unfallfolgen in Grenzen und macht Ihr Arbeitsumfeld sicherer.









Unfälle passieren jeden Tag. Mit den richtigen Erste-Hilfe-Lösungen in Reichweite, genau dort, wo Unfälle passieren können, minimieren Sie deren Ausmaß und Folgen. Eine auf Ihren Arbeitsplatz zugeschnittene Erste-Hilfe-Lösung hilft Ihnen, sich auf Unfälle vorzubereiten und Augenverletzungen, Schnitte und kleinere Wunden schnell, sicher und auf hygienische Weise zu behandeln.

# SCHNELLE UND EFFEKTIVE HILFE, DIE ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST

Eine große Auswahl an Augenspülungen, Pflastern, Brandgelen und Wundreinigungstüchern hilft, Sie oder Ihre Kollegen schnell zu behandeln und Verletzungen zu minimieren. Dafür müssen die zu den Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes passenden Sicherheitsprodukte zur Verfügung stehen.

Wir helfen Ihnen bei der Suche nach der richtigen Lösung, egal ob Sie in einem Büro arbeiten oder mit Säuren oder Alkali in einer Umgebung mit hohem Risiko (Laden Batterien, industrielle Reinigung, Laborarbeiten oder petrochemische Industrie) umgehen.

### PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR HOHE ARBEITSBELASTUNG

Ihre Hände, Ihre Augen und Ihr Kopf sind Ihre wichtigsten Arbeitsmittel, unabhängig von Ihrer beruflichen Tätigkeit. Selbst kleine Unfälle können Ihre Arbeit beeinträchtigen, und größere können noch schwerwiegendere Auswirkungen haben – wenn Sie nicht vorbereitet sind. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen haben Sie die passende Erste-Hilfe-Lösung in Reichweite und können so viele kleinere alltägliche Unfälle erheblich minimieren.



Plum Augenspülung ist bei Unfällen einfach zu verwenden.



Den Augenaufsatz in Pfeilrichtung um 360° drehen, bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen, die Flasche drücken und die Augen spülen.



Alternativ den Kopf nach vorne lehnen und durch vorsichtiges Drücken der Flasche die Augen spülen.

Die blaue Spüllösung Plum pH Neutral bietet sofortige Erste Die grüne Plum Augenspülung hilft. Hilfe bei schweren Unfällen mit Säuren und Alkali. Schmutz und Fremdkörper zu entfernen. Die weichen Flaschen sind einfach in der Handhabung und spülen die Augen mit einem sanften Run Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphale und gleichmäßigen Strahl. Klare Gebrauchsanweisung Klare Piktogramme und Symbole zeigen die Aufbewahrung und Handhabung. S0064 4604 79755 Ökonomisch durch lange 2022 12 Haltbarkeit von 3.5 Jahren ab Produktionsdatum Das Haltbarkeitsdatum ist deutlich auf der Vorderseite des Etiketts angegeben. Schnell und einfach Die ergonomisch geformte zu öffnen. Eine einzige Augenschale aus weichem Umdrehung bricht die Kunststoff passt sich an die Versieaeluna und die Mit dem ergonomischen natürliche Augenform an. Flasche ist spülbereit. DUO Augenaufsatz können Leicht zusammendrücken. beide Augen gleichzeitig bevor die Augenschale auf gespült werden. Der Aufsatz das Auge gesetzt wird. Der hilft dabei, die Augen offen Aufsatz hilft dabei, das Auge zu halten und sorgt für eine offen zu halten und sorgt für gleichmäßige Spülung und eine gleichmäßige Spülung Ausnutzung der Spülzeit. und Ausnutzung der Spülzeit.

# Schnell zugängliche Augenspüllösungen

Ein schneller Zugang zu Augenspülung ist an jedem Arbeitsplatz entscheidend, an dem ein Risiko von Augenverletzungen besteht. Denn hier entscheidet jede Sekunde über den Ausgang eines Unfalls.

### SIE HABEN NUR ZWEI AUGEN – PASSEN SIE GUT AUF SIE AUF

Das Sehvermögen ist einer der wichtigsten Sinne. Passen Sie deshalb auf Ihre Augen auf. Egal wie vorsichtig Sie sind, Unfälle können passieren. Seien Sie deshalb mit der richtigen Ersten Hilfe am richtigen Ort auf Unfälle vorbereitet. Mit einer Augenspüllösung, die an Orten mit hohem Risiko immer griffbereit ist, sind Sie bei Augenverletzungen bestens gewappnet.

### BREITES SORTIMENT EINZIGARTIGER SPÜLLÖSUNGEN

Unsere Priorität ist es, Ihnen dabei zu helfen, einen sichereren Arbeitsplatz zu gewährleisten, und unsere Konzepte werden in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Augenspezialisten entwickelt. Das bedeutet, unsere Produkte sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Dank der klaren Piktogramme, die die korrekte Anwendung angeben, sind sie ganz einfach zu verwenden. Der Augenaufsatz hält die Augen offen. Die Spülflüssigkeit trifft das Auge an der richtigen Stelle, in der richtigen Menge und in einem sanften und gleichmäßigen Strahl.



Die Produkte sind gemäß
Leitfaden zur Klassifizierung
der Medizinprodukte-Richtlinie
(93/42/EWG) mit der
CE-Kennzeichnung versehen.



# So wählen Sie die richtige Augenspülung

Bei Augenunfällen können verschiedene schädliche Substanzen die Ursache sein – wählen Sie daher die richtige Augenspülung entsprechend.

Je nach Unfallursache ist eine bestimmte Augenspülung erforderlich. Bei Unfällen muss zuerst festgestellt werden, ob diese durch Fremdkörper oder durch Säuren bzw. Alkali verursacht wurden - und, wenn möglich, welchen pH-Wert die jeweilige Substanz hat.

Deshalb ist die Kenntnis der verwendeten Chemikalien wichtig, um im Erste Hilfe Fall die richtige Spüllösung anzuwenden.


Ein Augenspülplan hilft durch klare Vorgaben bei der Auswahl der richtigen Augenspülung. Bringen Sie den Augenspülplan neben Augenspülstationen, -wandboxen und QuickSafe® an.



Markieren Sie dazu eine Stelle in 145 cm

Höhe vom Boden und bringen Sie den

Augenspülplan dort an.

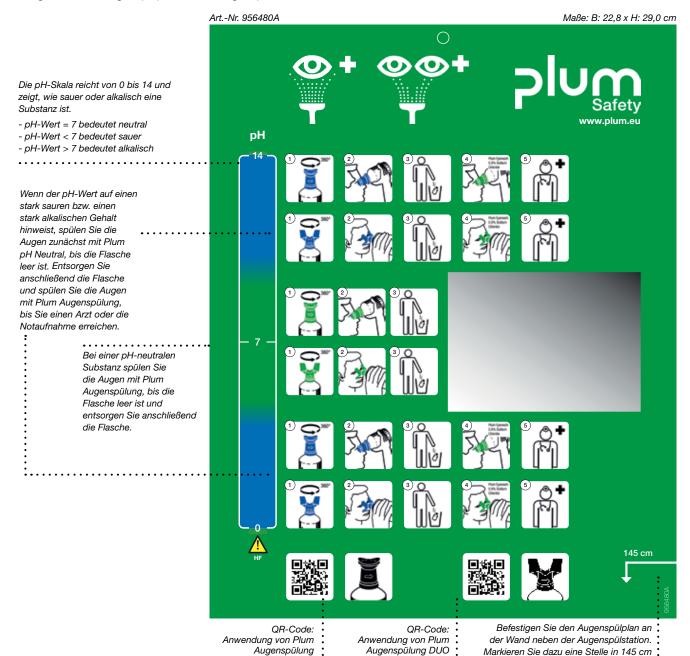

(Animationsvideo)

(Animationsvideo)



# Beide Augen gleichzeitig spülen

Jetzt müssen Sie nicht länger überlegen, welches Auge Sie zuerst retten möchten. Der DUO Augenaufsatz von Plum ist eine einzigartige Lösung, mit der Sie beide Augen gleichzeitig spülen können.

### VIELE UNFÄLLE BETREFFEN BEIDE AUGEN

Augenunfälle durch Chemikalien betreffen oft beide Augen. Mit einem DUO Augenaufsatz sind Sie gut auf Unfälle vorbereitet, denn er ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen. Die Frage, ob Sie sich um das eine oder das andere Auge kümmern, stellt sich also nicht mehr: Retten Sie beide.

### DER AUGENAUFSATZ FÜR OPTIMALE SPÜLUNG

Neben der Konzentration der Chemikalie ist die Kontaktzeit der kritischste Faktor bei Unfällen mit Säuren und Alkali. Entscheidend ist, dass die verfügbare Augenspülung die schädliche Substanz so schnell wie möglich neutralisiert. Mit dem einzigartigen DUO Augenaufsatz können Sie beide Augen gleichzeitig behandeln.

Die Form des Augenaufsatzes hilft dabei, die Augen während des Spülens offen zu halten sowie die richtige Flüssigkeitsmenge und die richtige Spülzeit sicherzustellen.

Plum Augenspülung und Plum pH Neutral sind Einwegprodukte. Dadurch ist sichergestellt, dass die Spülflüssigkeit jedes Mal steril ist.





# Augenspülung zum schnellen Entfernen von Fremdkörpern

Plum Augenspülung lindert Beschwerden durch Fremdkörper und kann so möglichen Folgeschäden vorbeugen.

Fremdkörper können leicht ins Auge gelangen. Schmutz, Staub, Reinigungsmittel oder Farbe an den Händen gefährden die Augen. Das Risiko erhöht sich bei der Bedienung von Maschinen und Werkzeugen, bei denen Holz- oder Metallsplitter in die Augen gelangen können.

Fremdkörper können sich im Auge festsetzen und zu Entzündungen, Schädigungen der Hornhaut oder der Iris führen. Dem können Sie durch Spülung unmittelbar nach dem Unfall entgegenwirken.

Plum Augenspülung enthält eine sterile Kochsalzlösung mit 0,9 % Natriumchlorid, welche der natürlichen Augenflüssigkeit entspricht. Sie spült das Auge mit einem sanften und angenehmen Strahl. Das Produktsortiment umfasst ein breites Spektrum - von der kleinen handlichen Flasche für den mobilen Einsatz bis hin zu Wandstationen für die Montage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz.



### 200 ML / 500 ML / 1000 ML PLUM AUGENSPÜLUNG

Flaschen mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Flaschen einzeln oder als Nachfüllung für Augenspülstationen und -wandboxen verwendbar. Lieferung mit Staubschutzkappe. Die 200-ml-Flasche kann einfach in der speziell konzipierten Gürteltasche, im Erste-Hilfe-Kasten, im Werkzeugkasten usw. aufbewahrt werden.

Inhalt: 200 ml Inhalt: 500 ml Inhalt: 1000 ml Verpackung: 10 x 200 ml 12 x 500 ml 6 x 1000 ml Verpackung: Verpackung: Art.-Nr.: Art.-Nr.: 4604 Art.-Nr.: 4707 4691 PZN: PZN: 04397388 4397402 PZN: 03099111



### 5 X 20 ML QUICKRINSE REFILLS

5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe®, QuickFix&Rinse und QuickRinse Spender verwendbar.

 Inhalt:
 5 x 20 ml

 Verpackung:
 4 x 5 x 20 ml

 Art.-Nr.:
 5160

 PZN:
 10066336



### 500 ML / 1000 ML PLUM AUGENSPÜLUNG DUO

Flaschen mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Der ergonomische DUO Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen.

Inhalt:	500 ml
Verpackung:	6 x 500 ml
ArtNr.:	4861
PZN:	10249858

 Inhalt:
 1000 ml

 Verpackung:
 6 x 1000 ml

 Art.-Nr.:
 4800

 PZN:
 06134546



### 200 ML / 500 ML PLUM AUGENSPÜLUNG IM EINZELKARTON

Plum Augenspülung im Einzelkarton. Der Karton schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und eignet sich für den Einzeleinsatz und mobile Arbeitsplätze.

Inhalt:	200 ml
Verpackung:	10 x 200 ml
ArtNr.:	4695
PZN:	11535388

 Inhalt:
 500 ml

 Verpackung:
 12 x 500 ml

 Art.-Nr.:
 4605

 PZN:
 11535402



### 3 X 500 ML PLUM AUGENSPÜLUNG

Praktisches und handliches Set mit drei Flaschen Plum Augenspülung. Einfach zum Mitnehmen im Auto oder auf dem Weg zum Arzt oder in die Notaufnahme.

 Inhalt:
 3 x 500 ml


 Verpackung:
 4 x 3 x 500 ml

 Art.-Nr.:
 4620

 PZN:
 10306384





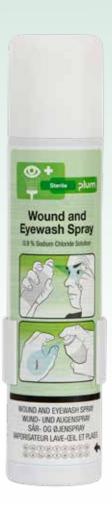

Die Wund- und Augensprays von Plum auf Natriumchloridbasis können leicht mitgeführt werden und sind einfach zu handhaben. Das gleichmäßige Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Ideal für Industrie, Produktion, Labore, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Polizei, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Katastrophenhilfe.

# Wund- und Augenspray

Schnelle und einfache Erste Hilfe in Sekunden – für Haut und Augen!

Schonendes Wund- und Augenspray für kleinere Unfälle wie Schnitte und Kratzer auf der Haut oder zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus Wunden und Augen. Das Wund- und Augenspray ist als Natriumchloridlösung und auch als phosphatgepufferte Natriumchloridlösung erhältlich. Die Dosen können schnell und einfach mit einer Hand bedient werden. Die Staubschutzkappe schützt den Sprühkopf vor Verschmutzung, das Spray ist für den Mehrfachgebrauch geeignet und die Dose ist vollständig recyclebar.

Eine schnelle und einfache Lösung, die das Risiko weiterer Infektionen oder Verletzungen minimiert.



Sprühkopf vor dem Gebrauch durch kurzes Sprühen in die Luft reinigen





Sprühkopf mindestens 10 cm von der Wunde oder dem Auge entfernt halten. Zum Sprühen auf die Düse drücken. Wunde bzw. Auge nicht mit dem Sprühkopf berühren.



### 50 ML / 250 ML WUND- UND AUGENSPRAY

Eine 0,9 % Natriumchloridlösung, die bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Schnitte und Kratzer auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge sofortige Hilfe bietet. Dabei hilft es Ihnen, das Risiko für Infektionen oder Folgeschäden zu minimieren.



### 200 ML WUND- UND AUGENSPRAY

Eine 0,9 % phosphatgepufferte Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus Wunden und Augen. Unterstützt die Wundheilung, vermindert Krankheitserreger sowie Blutungen (auch geronnenes Blut) und abgestorbenes Gewebe. Zusätzlich wird das Gewebe befeuchet.



### 200 ML / 250 ML WANDHALTERUNG

Montieren Sie die Wund- und Augenspraydosen an der Wand, damit Ihre Erste Hilfe sichtbar ist. Die einfache Wandhalterung spart Minuten bei leichten Augen- oder Hautverletzungen. So ist das Wund- und Augenspray immer griffbereit.

### Wund- und Augenspray

 Inhalt:
 50 ml

 Verpackung:
 24 x 50 ml

 Art.-Nr.:
 45530

 PZN:
 14130060

 Sprachen:
 en, de, se, da, fr, no, fi, pt, it, nl, es, pl

 Inhalt:
 50 ml

 Verpackung:
 24 x 50 ml

 Art.-Nr.:
 45531

 Sprachen:
 en, tr, cs, si, hu, sk, lt, et, lv, el, ru

 Inhalt:
 250 ml

 Verpackung:
 12 x 250 ml

 Art.-Nr.:
 4554

 PZN:
 13580861

 Wandhalterung:
 4123

### Wund- und Augenspray

 Inhalt:
 200 ml

 Verpackung:
 200 ml

 Art.-Nr.:
 12 x 200 ml

 PZN:
 4556

 Wandhalterung:
 15587643

 4123

Plum Wund- und Augenspray ist gemäß Leitfaden zur Klassifizierung der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) mit der CE-Kennzeichnung versehen.

### Halterung für 200 ml und 250 ml Spray

 Inhalt:
 1

 Verpackung:
 24 Stk.

 Art.-Nr.:
 4123



### Produktvorteile

- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Sichere Spülung
- Staubschutzkappe zum Schutz des Sprühkopfs vor Verschmutzung
- Einfacher Transport, eingestuft als nicht entzündliches Aerosol
- Bis zu 100 % Produktentleerung
- Dose ist vollständig recyclebar
- Hypoallergen
- Sterile Lösung ohne Konservierungsstoffe
- 3 Jahre haltbar
- Haltbarkeitsdatum am Dosenboden



# Augenspülung bei Unfällen mit Chemikalien

Plum pH Neutral neutralisiert Säuren und Alkali und spült sie schnell aus den Augen

### **WICHTIG**



Die hier gemachten HF
Angaben sind in Bezug auf
Flusssäure, die giftig und
hochätzend für Haut und Knochen
ist, unter Vorbehalt zu verstehen.

Plum pH Neutral und Plum Augenspülung können zwar neutralisieren und spülen, nicht aber die ätzende Wirkung begrenzen. Sie sind nicht als Erste Hilfe bei Augenunfällen mit Flusssäure

### EMPFOHLENE ANWENDUNG VON PLUM PH NEUTRAL

Plum pH Neutral ist eine Augenspüllösung bei Unfällen mit Säuren und Alkali

Spülen Sie die Augen schnellstmöglich mit Plum pH Neutral, um den pH-Wert der schädlichen Substanz auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen

Spülen Sie anschließend mit Plum Augenspülung mit 0,9 % Natriumchlorid weiter, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen

### GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN SIND ÜBERALL

In vielen Berufen, Betrieben und Branchen sind Mitarbeiter der Gefahr schwerer Augenverletzungen durch Chemikalien ausgesetzt, z. B. in Chemiefabriken, in Recyclinganlagen, auf Baustellen und im Bergbau. Hier ist eine neutralisierende Augenspülung unbedingt notwendig, um Unfallfolgen zu minimieren.

Säuren und Alkali zersetzen die Struktur von Haut und Schleimhäuten. Wie schwer eine Verletzung durch Verätzung ist, hängt vor allem von folgenden Faktoren ab:

- Konzentration der Chemikalie
   Starke Säuren und Alkali sind extrem ätzend.
- Temperatur
- Hohe Temperaturen erhöhen die ätzenden Eigenschaften der Chemikalie.
- Kontaktzeit
   Je l\u00e4nger die Kontaktzeit, desto tiefer dringt die sch\u00e4dliche Substanz ein.

### SEKUNDEN KÖNNEN ENTSCHEIDEND SEIN

Bei Augenverletzungen durch Säuren und Alkali kommt es darauf an, die Chemikalie schnellstens auf einen pH-Wert von etwa 7,4 zu neutralisieren – was dem normalen pH-Wert der Augenflüssigkeit entspricht –, bevor die Säure oder Alkali in die Hornhaut eindringen kann.

Um bei Risiko von Verletzungen durch Säure oder alkalische Substanzen optimale Sicherheit zu gewährleisten, muss die Augenspüllösung:


- · leicht zugänglich,
- schnell anwendbar
- und effektiv sein.

# SCHNELL WIRKENDE UND EFFEKTIVE AUGENSPÜLUNG IST ENTSCHEIDEND

Plum pH Neutral ist eine 4,9 % Phosphatpufferlösung, die sogar starke Säuren und Alkali schnell und effektiv neutralisiert. Die Flüssigkeit besteht aus Phosphatsalzen, die im menschlichen Körper vorhanden sind. Der Hydrogenphosphatpuffer ist effektiv gegen Säuren und der Dihydrogenphosphatpuffer wirkt gegen Alkali. Die Wirkung von Plum pH Neutral wurde in wissenschaftlichen Studien dokumentiert.<sup>1) 2)</sup>

Wir haben die neutralisierende Wirkung von Plum pH Neutral sowohl bei starken Säuren als auch bei starken Alkali im Vergleich zur Wirkung von Augenspülung mit 0,9 % Natriumchlorid getestet. Der Test hat deutlich gezeigt, dass Plum pH Neutral sowohl Säuren als auch Alkali schnell auf einen ungefährlichen pH-Wert neutralisiert. Die 0,9 % Natriumchloridlösung verdünnt die Flüssigkeit, wobei sich der pH-Wert jedoch nur gering verändert (Abbildung 1).

Abbildung 1: Neutralisierungseffekt von pH Neutral und 0,9 % Natriumchloridlösung\*

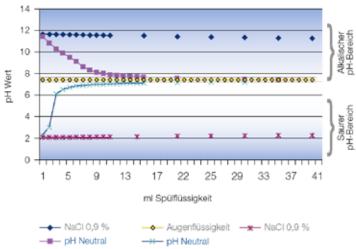

\*Es handelt sich hierbei um eine von Plum A/S durchgeführte Titrationsanalyse im Labor (in vitro Test). Hierbei wurde die Flüssigkeit Plum pH Neutral und 0,9 % Natriumchloridlösung schrittweise einer Lösung mit 1 Tropfen Schwefelsäure + 40 ml Leitungswasser bzw. 1 Tropfen Kaliumhydroxid + 40 ml Leitungswasser zugeführt. Die Änderungen des pH Wertes und die dafür erforderlichen Mengen von Spüflüssigkeit wurden für die Beurteilung des Effektes herangezogen.

<sup>1:</sup> Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44ff.

<sup>2:</sup> Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kaninchenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.







200 ML PLUM PH NEUTRAL



500 ML PLUM PH NEUTRAL DUO

Flaschen mit steriler 4,9 % Phosphatpufferlösung, die Säuren und Alkali schnell neutralisiert. Flaschen einzeln oder als Nachfüllung für Augenspülstationen und -wandboxen verwendbar.

Einzelkarton mit 200 ml Plum pH Neutral. Der Karton schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und eignet sich für den Einzeleinsatz und mobile Arbeitsplätze. Die 200-ml-Flasche kann einfach in der speziell entwickelten Gürteltasche, im Erste-Hilfe-Kasten, im Werkzeugkasten usw. mitgeführt werden. Staubschutzkappe im Lieferumfang. Die 500 ml Flasche verfügt über einen ergonomischen DUO Augenaufsatz, der das gleichzeitige Spülen beider Augen ermöglicht.

 Inhalt:
 200 ml

 Verpackung:
 10 x 200 ml

 Art.-Nr.:
 4755

 PZN:
 11535394

Inhalt: 200 ml Verpackung: 10 x 200 ml Art.-Nr.: 4752 PZN: 04397394

 Inhalt:
 500 ml

 Verpackung:
 6 x 500 ml

 Art.-Nr.:
 4801

 PZN:
 06134552



### GÜRTELTASCHE FÜR 200-ML-FLASCHEN


Mit der Tasche mit dem praktischen Klettverschluss lässt sich die Augenspülung an Gürtel, Arbeitskleidung u. ä. befestigen und ist immer mit dabei.

Die Tasche lässt sich leicht öffnen, und ermöglicht schnelle Erste-Hilfe bei Unfällen. Eine sichere, hygienische und schützende Flaschenaufbewahrung. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.

 Verpackung:
 10 Stk.

 Art.-Nr.:
 4692

 PZN:
 04397460

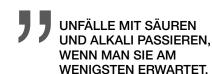

Plum pH Neutral DUO rettete einem Mitarbeiter bei SITA France das Augenlicht. Das Unternehmen verarbeitet Kunststoffabfälle, darunter auch Plastikflaschen mit Resten von Reinigungsmitteln. Dem Mitarbeiter gelangte Flüssigkeit aus einer solchen Flasche in beide Augen. Dank Plum pH Neutral DUO konnte die schädliche Substanz neutralisiert werden und der Mitarbeiter konnte bereits am Folgetag wieder arbeiten.







Plötzlich platzt ein Rohr oder ein Schlauch löst sich vom Verbindungsstück. Es kommt zum Austreten stark ätzender Flüssigkeiten. Auf diese Weise ereignen sich viele Unfälle. Wenn eine solche Flüssigkeit in die Augen gelangt, zählt jede Sekunde, um das Augenlicht zu retten.

# Offene Augenspülstationen

Eine offene Station für die Wandmontage bietet einen guten Überblick sowie schnellen und einfachen Zugang zur Ersten Hilfe

# SCHÜTZEN SIE IHRE MITARBEITER – STELLEN SIE ERSTE HILFE ZUR VERFÜGUNG

Wenn ein Unfall passiert, ist keine Zeit mehr da, um nach Erste-Hilfe-Material zu suchen.

Systematisieren Sie die Erste Hilfe mit einer Wandstation und stellen Sie einen leichten Zugang bei Unfällen sicher. Zur Wahl stehen offene Wandstationen und Wandboxen. Letztere sind besonders gut für staubige Arbeitsumgebungen geeignet, um die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen zu schützen.

Halten Sie stets zusätzliche Flaschen griffbereit, damit die Spülung auf dem Weg zum Arzt zur weiteren Behandlung fortgesetzt werden kann.

### **EINFACHE MONTAGE**

Alle Wandstationen lassen sich einfach montieren und werder mit Piktogrammen geliefert, die die Anwendung der Produkte klar darstellen.



### PLUM AUGENSPÜLSTATION

Verpackung:

Art.-Nr.:

PZN:

Wandstation mit 500 ml Plum Augenspülung. Besonders geeignet für kleinere Arbeitsplätze.

1 4611 04397425



### PLUM AUGENSPÜLSTATION DUO

Wandstation mit 1000 ml Plum Augenspülung DUO. Für die schnelle und gleichzeitige Spülung beider Augen.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4802

 PZN:
 06134575





# 



### PLUM KOMBI-STATION

Wandstation mit 200 ml Plum pH Neutral und 500 ml Plum Augenspülung.

Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4770

 PZN:
 00622871

### PLUM KOMBI-STATION DUO

Wandstation mit 500 ml Plum pH Neutral DUO und 1000 ml Plum Augenspülung DUO. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und dass beide Augen betroffen sind.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4803

 PZN:
 06134581









### PLUM AUGENSPÜLSTATION

Wandstation mit  $2 \times 500$  ml Plum Augenspülung. Besonders geeignet für Arbeitsumgebungen mit geringer Staubbelastung, an denen aber die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4694

 PZN:
 04397431

### PLUM AUGENSPÜLSTATION MAXI

Wandstation mit  $2 \times 1000$  ml Plum Augenspülung. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen ein längeres Spülen erforderlich sein könnte.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4708

 PZN:
 03128893





### PLUM KOMBI-BOX

Staubgeschützte Augenspülwandbox mit 200 ml Plum pH Neutral und 500 ml Plum Augenspülung. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4789

 PZN:
 00622865

# Staubgeschützte Augenspülwandbox

Die Wandbox schützt Ihre Augenspülflaschen vor Schmutz und Staub und ist leicht und schnell zu öffnen

# WIRKEN SIE DEN FOLGEN EINES UNFALLS DURCH KOMBINIERTES SPÜLEN ENTGEGEN

Bei Unfällen mit Säuren und Alkali wird eine kombinierte Spülung empfohlen – zuerst mit Plum pH Neutral und danach mit Plum Augenspülung. Die Kombi-Box enthält beide Produkte und ermöglicht schnellen und einfachen Zugang. Neutralisieren Sie zuerst die Säure oder Alkali mit Plum pH Neutral und spülen Sie die Augen danach mit Plum Augenspülung, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.

Wenn Sie hauptsächlich mit flüssigen Chemikalien arbeiten, empfehlen wir Plum pH Neutral DUO. So können Sie im Notfall beide Augen gleichzeitig spülen.

Wir empfehlen die offenen Stationen für Umgebungen ohne Staub- und Schmutzbelastung, z. B. Labore. Die geschlossenen Stationen schützen die Produkte in staubigen Umgebungen. Alle Stationen lassen sich einfach montieren und sind mit Spiegel und Piktogrammen ausgestattet, die die Anwendung der Augenspülflaschen klar darstellen.



### PLUM AUGENSPÜLWANDBOX

Staubgeschützte Augenspülwandbox mit 2 x 500 ml Plum Augenspülung. Besonders geeignet für staubige Arbeitsumgebungen, an denen die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4650

 PZN:
 04397448



### PLUM KOMBI-BOX DUO

Staubgeschützte Augenspülwandbox mit 500 ml Plum pH Neutral DUO und 500 ml Plum Augenspülung DUO. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und dass beide Augen betroffen sind.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4862

 PZN:
 11535365



### PLUM KOMBI-BOX DUO MAXI

Staubgeschützte Augenspülwandbox mit 500 ml Plum pH Neutral DUO und 1000 ml Plum Augenspülung DUO. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und dass beide Augen betroffen sind.


 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 4810

 PZN:
 06585289

Das Soft-Close-System erleichtert das Öffnen und Schließen der Wandbox und schützt die Augenspülungen vor Staub und Schmutz aus der Umgebung.

> Hergestellt aus Polystyrol - ein leichtes, isolierendes und umweltfreundliches Material. Die Box wird mit weniger Kunststoff im Vergleich zu einem 100-%-Kunststoffprodukt hergestellt. Nach einem Austausch kann die Box über die Wertstoffsammlung entsorgt werden.

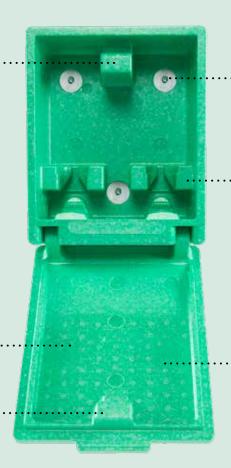

Einfache Montage in der Nähe des Arbeitsplatzes

Die Halter sind für alle Flaschen der Plum Augenspülung und von pH-Neutral geeignet sowohl mit dem gewöhnlichen als auch mit dem DUO Augenaufsatz – und sorgen für eine sichere Aufbewahrung

Als "Worldstar Winner" für Innovation ausgezeichnet, weil die Verpackung ein integrierter und dauerhafter Bestandteil des Produkts ist.



### PLUM AUGENSPÜLWANDBOX DUO MAXI

Staubgeschützte Augenspülwandbox mit 2 x 1000 ml Plum Augenspülung DUO. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen ein längeres Spülen erforderlich sein könnte.

Verpackung: Art.-Nr.: 4816 PZN: 06585272

### **PLUM PLUG & HEAT** AUGENSPÜLWANDBOX, KLEIN

数据图据所

Beheizbare und staubgeschützte Augenspülwandbox. Geeignet für 2 Flaschen mit 200 ml und/oder 500 ml Plum Augenspülung oder Plum pH Neutral.

Ohne Inhalt.

1

Verpackung: Art.-Nr.: 4672

### **PLUM PLUG & HEAT** AUGENSPÜLWANDBOX, GROSS

Beheizbare und staubgeschützte Augenspülwandbox. Geeignet für 2 Flaschen mit 500 ml und/oder 1000 ml Plum Augenspülung oder Plum pH Neutral.

Ohne Inhalt.

网络四氢商

BU BY

Verpackung: Art.-Nr.: 4551





Pflasterspender an der Wand montieren und Zeit sparen. Pflaster aufkleben und zurück an die Arbeit!

### SCHNELLE UND HYGIENISCHE HILFE BEI LEICHTEN VERLETZUNGEN

Verschwenden Sie bei kleinen Verletzungen keine Zeit mehr. Nehmen Sie sich ein Pflaster aus dem Spender, bringen Sie es an und schon geht es zurück an die Arbeit. QuickFix löst das Problem einfach, hygienisch und effektiv.

Tagtäglich passieren zahlreiche kleinere Unfälle bei der Arbeit, bei denen man einfach nur ein Pflaster braucht. Wählen Sie das passende Pflaster für Ihre Arbeitssituation. Wir bieten geeignete Lösungen, egal ob Sie Pflaster für gewöhnliche Arbeitsumgebungen, für Arbeitsplätze mit hoher Luftfeuchtigkeit oder für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie benötigen.



Pflaster aus dem Spender nehmen. Es ist einsatzbereit ...



... und kann mit einer Hand angebracht werden.



# Flexibles Pflasterspendersystem für alle Arbeitsbereiche

QuickFix bietet Ihnen schnelle Erste Hilfe bei kleineren Schnittverletzungen

### WÄHLEN SIE DEN SPENDER, DER AM BESTEN ZU IHNEN PASST

Unser Sortiment an QuickFix Pflasterspendern umfasst zwei Spendertypen in unterschiedlichen Designs. Sie wurden für unterschiedliche Arbeitsbereiche entwickelt und können mit Pflastern und Augenspülampullen in verschiedenen Kombinationen gefüllt werden, um den Anforderungen jeder Arbeitssituation gerecht zu werden.



### QUICKFIX SPENDER

Der klassische grüne QuickFix Spender ist mit zwei Pflasterrefills und/oder einem Refill mit QuickRinse Augenspülampullen befüllt. Das Spendergehäuse schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz. Der Spender enthält ein Innenfach für kleinere Utensilien und kann mit Absperrvorrichtung und passendem Schlüssel verriegelt werden.

Der Spender ist an jedem Ort einsetzbar, wo kleinere Verletzungen passieren können. Der Spender ist für die Montage an jedem stationären Arbeitsplatz ausgelegt.

Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm





### **QUICKFIX UNO SPENDER**

Dieser kleine Pflasterspender verbindet Sicherheit am Arbeitsplatz mit modernem Design. Der formschöne Spender eignet sich perfekt für den Einsatz in Büros, Restaurants, Wasch- und Sozialräumen und anderen staubfreien Arbeitsumgebungen.

Der Spender ist mit einem QuickFix Pflasterrefill befüllt.

QuickFix UNO ist mit einer glänzend weißen oder transparenten Abdeckung erhältlich.

Maße: H: 85 x B: 130 x T: 35 mm



# Wählen Sie Ihren QuickFix Pflasterspender

### - nach Ihren speziellen Anforderungen



### QUICKFIX WATER RESISTANT

Spender mit 90 wasserfesten Pflastern, die für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5501
Refill ArtNr.:	5511
PZN:	09534335



### QUICKFIX ELASTIC UND

### WATER RESISTANT

Spender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5507
Refill ArtNr.:	5512 & 5511
PZN:	09534281



### QUICKFIX ELASTIC

Spender mit 90 elastischen Textilpflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5502
Refill ArtNr.:	5512
PZN:	09534269



### QUICKFIX ELASTIC LONG

Spender mit 60 langen elastischen Pflastern, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5528
Refill ArtNr.:	5508
PZN:	09534393



### QUICKFIX DETECTABLE

Spender mit 90 blauen Pflastern mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lassen.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5503
Refill ArtNr.:	5513
PZN:	09534275



### QUICKFIX DETECTABLE LONG

Spender mit 60 langen blauen Pflastern mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lassen.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5529
Refill ArtNr.:	5509
PZN:	09535292



### QUICKFIX ALOE VERA

Spender mit 90 Aloe-Vera-Pflastern, die beruhigen und Feuchtigkeit spenden.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5506
Refill ArtNr.:	5514
PZN:	15570890



### QUICKFIX&RINSE

Spender mit 45 elastischen Pflastern und 5 Ampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung:	10
ArtNr.:	4631
Refill ArtNr.:	5512 & 5160
PZN:	10987875



### QUICKFIX ALU

Spender mit 90 Pflastern mit Antihaftschicht aus Aluminium und PE.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5505
Refill ArtNr.:	5515
PZN:	15570909



### QUICKRINSE

Spender mit 10 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung:	10
ArtNr.:	4632
Refill ArtNr.:	5160
PZN:	10987881



### QUICKFIX BLOOD STOPPER

Spender mit 90 Pflastern mit hämostatischem Effekt.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5510
Refill ArtNr.:	5516
PZN:	15743899



### QUICKFIX SPENDER LEER

Spender ohne Inhalt. Mit Quick-Fix Nachfüllungen eigener Wahl befüllbar.

Verpackung:	10
ArtNr.:	5500



# QUICKFIX UNO SPENDER, TRANSPARENT

Transparenter Spender mit 45 blauen und auffälligen Pflastern mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die Pflaster bestehen aus atmungsaktivem Material.

 Verpackung:
 10

 Art.-Nr.:
 5540

 PZN:
 16830198

### QUICKFIX UNO SPENDER, TRANSPARENT

Transparenter Spender mit 45 elastischen Textilpflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

 Verpackung:
 10

 Art.-Nr.:
 5531

 PZN:
 13360243

## QUICKFIX UNO SPENDER, WEISS


Glänzend weißer Spender mit 45 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

 Verpackung:
 10

 Art.-Nr.:
 5532

 PZN:
 13360289



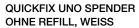



QUICKFIX UNO SPENDER
OHNE REFILL, TRANSPARENT

Der Spender kann mit Pflastern nach eigener Wahl befüllt werden. Alle QuickFix Pflaster-Refills können nach Ihren individuellen Bedürfnissen eingesetzt werden. Der Spender ist auch für eine Nachfüllung mit QuickRinse geeignet.

 Verpackung:
 10
 Verpackung:
 10

 Art.-Nr.:
 5534
 Art.-Nr.:
 5533

 PZN:
 13360326
 PZN:
 13360295



### QUICKFIX MINI

Kleine und praktische Packung mit 30 elastischen Pflastern. Nehmen Sie sie einfach überall hin mit, wo Sie ein Pflaster benötigen könnten. Jedes Pflaster ist einzeln verpackt und sofort nach Entnahme aus der Packung einsatzbereit.

 Verpackung:
 30 x 30

 Art.-Nr.:
 5504

 PZN:
 09534298

 Pflastermaße:
 L: 72 x B: 25 mm



# QuickFix Pflaster-Refills

### Alle Refills im Überblick





### REFILL QUICKFIX ELASTIC

45 elastische und angenehme Textilpflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.



 Displaykarton:
 6 x 45

 Verpackung:
 8 x 6 x 45

 Art.-Nr.:
 5512

 PZN:
 09534312

 Maße:
 L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER** 

**Art.-Nr.:** 5502





### REFILL QUICKFIX DETECTABLE

45 blaue und auffällige Pflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die Pflaster bestehen aus atmungsaktivem Material.

REFILL

 Displaykarton:
 6 x 45

 Verpackung:
 8 x 6 x 45

 Art.-Nr.:
 5513

 PZN:
 09534341

 Maße:
 L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER** 

**Art.-Nr.:** 5503





### REFILL QUICKFIX WATER RESISTANT

45 wasserfeste Pflaster, die besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.

REFILL

 Displaykarton:
 6 x 45

 Verpackung:
 6 x 8 x 45

 Art.-Nr.:
 5511

 PZN:
 09534335

 Maße:
 L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER** 

**Art.-Nr.:** 5501



### QUICKFIX LONG ELASTIC UND DETECTABLE

30 extralange Pflaster, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können. Sie haben die Wahl zwischen elastischen Textilpflastern und blauen detektierbaren Pflastern.





REFILL ELASTIC LONG

 Displaykarton:
 6 x 30

 Verpackung:
 8 x 6 x 30

 Art.-Nr.:
 5508

 PZN:
 09535300

 Maße:
 L: 120 x B: 20 mm

**SPENDER** 

**Art.-Nr.:** 5528



REFILL DETECTABLE LONG

 Displaykarton:
 6 x 30

 Verpackung:
 8 x 6 x 30

 Art.-Nr.:
 5509

 PZN:
 09535323

 Maße:
 L: 120 x B: 20 mm

SPENDER

**Art.-Nr.:** 5529

QuickSafe®





### REFILL QUICKFIX ALOE VERA

Die in der Wundauflage enthaltene Aloe Vera ist für ihre lindernden, feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt. Sie schafft in der Wundumgebung optimale Bedingungen und begünstigt so den natürlichen Heilungsprozess. Verhindert Schorfbildung.

REFILL

 Displaykarton:
 6 x 45

 Verpackung:
 8 x 6 x 45

 Art.-Nr.:
 5514

 PZN:
 15386206

 Maße:
 L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER** 

Art.-Nr.: 5506





### **REFILL QUICKFIX ALU**

Pflaster mit mikronisierter Wundauflage aus Aluminium.

Die Antihaftschicht aus Aluminium und PE weist eine höhere Antihaftleistung auf als eine Standard-PE-Schicht. Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut.

REFILL

 Displaykarton:
 6 x 45

 Verpackung:
 8 x 6 x 45

 Art.-Nr.:
 5515

 PZN:
 15386235

 Maße:
 L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER** 

**Art.-Nr.:** 5505



### REFILL QUICKFIX BLOOD STOPPER

Pflaster mit hämostatischem Effekt. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht in deren Innerem ein Gel, das die Blutung innerhalb von ein bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt.

REFILL

 Displaykarton:
 6 x 45

 Verpackung:
 8 x 6 x 45

 Art.-Nr.:
 5516

 PZN:
 15570915

 Maße:
 L: 72 x B: 25 mm

**SPENDER** 

**Art.-Nr.:** 5510





### REFILL QUICKRINSE 5 X 20 ML

5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe®, QuickFix&Rinse und QuickRinse Spender verwendbar.

 Inhalt:
 5 x 20 ml

 Verpackung:
 4 x 5 x 20 ml

 Art.-Nr.:
 5160

 PZN:
 10066336



# QuickSafe® bietet schnell, einfach und sicher Erste Hilfe

Eine flexible Lösung, die einen schnellen Überblick über die verfügbare Erste Hilfe gibt – und mit der Sie immer die richtigen Produkte am richtigen Ort parat haben.

### MASSGESCHNEIDERTE ERSTE-HILFE-STATIONEN

Füllen Sie Ihre Erste-Hilfe-Station ganz nach Ihren Anforderungen. Augenspülung zum Ausspülen von Fremdkörpern aus den Augen. Plum pH Neutral für Unfälle mit Säuren oder Alkali. Pflaster, die für Ihre Arbeitssituation geeignet sind. Brandgel, das leichtere Verbrennungen lindert. Augenspülampullen für kleinere Unfälle und gereizte Augen. Tücher zur Wundreinigung. Wundkompressen für stärkere Blutungen.

Durch die transparente Abdeckung haben Sie jederzeit alle Produkte im Blick.



# DIE WICHTIGSTEN DINGE AM RICHTIGEN ORT

Spæncom A/S ist führender Anbieter von Betonelementen. Das Unternehmen hat Plum Quicksafe® ausgewählt, um die Sicherheit seiner mehr als 500 Mitarbeiter zu erhöhen. "Wir haben uns für Plum Quicksafe® entschieden, weil die Station für individuelle Arbeitsbereiche angepasst werden kann. In den Bereichen, in denen Betonelemente mit Säure gewaschen werden, können wir z. B. die Plum Augenspülung und Plum pH Neutral DUO in der Nähe der Arbeitsplätze aufbewahren. QuickSafe® enthält die wichtigsten Artikel, der Kasten kann so montiert werden, dass Erste Hilfe griffbereit ist, und dank der transparenten Abdeckung ist alles sichtbar. Das ist praktisch." Jany Johannsen.

Umwelt- und Sicherheitskoordinator



# Hilfe immer zur Hand

Einfacher Zugang zu Erster Hilfe ist der Schlüssel zu mehr Sicherheit

QuickSafe® vereint die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte an einem Ort. Bringen Sie die Station dort an, wo das Unfallrisiko am größten ist. Die QuickSafe Station ist nicht viel größer als ein A3-Blatt, so dass sie an nahezu jedem gefährdeten Arbeitsplatz angebracht werden kann.

Die transparente Abdeckung bietet sofortigen Überblick über den Inhalt sowie schnellen und einfachen Zugriff. So sehen Sie auch leicht, wann die Station nachgefüllt werden muss. Die einzeln verpackten Produkte werden durch die Abdeckung vor Staub und Schmutz geschützt und machen QuickSafe® zu einer sowohl hygienischen als auch eleganten Lösung.



### QuickSafe® EMPTY

### IHRE WAHL

Wenn Sie Ihre Erste-Hilfe-Produkte frei nach Ihrem eigenen Bedarf zusammenstellen möchten, beginnen Sie mit einer leeren Station und befüllen diese nach Wahl.



### KAUFEN SIE EINE LEERE STATION UND FÜLLEN SIE DIESE NACH IHREM BEDARF


Falls die auf der nächsten Seite dargestellten vier unterschiedlichen QuickSafe®-Lösungen Ihren Anforderungen nicht gerecht werden, können Sie sich eine Lösung zusammenstellen, die zu Ihnen passt. Befüllen Sie die Station mit Augenspülflaschen und anderen Erste-Hilfe-Produkten nach Ihrem Bedarf.

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 5173

 PZN:
 10066371

 Maße:
 H: 430 x B: 253 x T: 92 mm

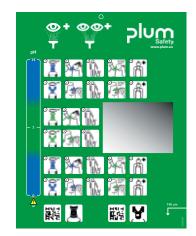

Der Augenspülplan ist im Lieferumfang aller QuickSafe® Stationen enthalten





# QuickSafe® BASIC

### **EIN GUTER AUSGANGSPUNKT**

Mit QuickSafe® Basic erhalten Sie die wichtigsten Produkte und können selbst entscheiden, mit welchen Produkten Sie die oberen Fächer befüllen möchten. Damit haben Sie vollständige Flexibilität.



## HABEN SIE BESONDERE ANFORDERUNGEN AN IHRE ERSTE-HILFE-STATION?

Das Rückgrat der gesamten QuickSafe® Serie ist die bewährte Augenspülung von Plum. Mit QuickSafe® Basic erhalten Sie diese zusammen mit Plum pH Neutral, Augenspülampullen und Pflastern. Der Rest ist Ihnen überlassen. Das erste Fach können Sie nach unternehmenseigenen Bedarfen organisieren.

INHALT:	ArtNr.:
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampuller	5160
1 x Refill für QuickFix Elastic	5512
mit 45 Pflastern	

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 5170

 PZN:
 10066342

 Maße:
 H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



# QuickSafe® COMPLETE

### DIE KOMPLETTE LÖSUNG

Augenspülung inklusive Plum pH Neutral und Augenspülampullen, Wundkompressen, Wundreinigungstücher, Pflaster und Brandgel für leichtere Verbrennungen.



### GROSSE AUSWAHL AN ERSTER HILFE

Mit QuickSafe® Complete erhalten Sie ein breites Sortiment an Erste-Hilfe-Produkten für kritische Situationen ebenso wie für verschiedene kleinere Alltagsunfälle.

INHALT:	ArtNr.:
18 x QuickCool Brandgel	5150
1 x QuickStop Wundkompresse 1 x 17 x 17 cm und 2 x 12 x 7,5 cm	5152
20 x QuickClean Wundreinigungstuch	5151
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampulle	n 5160
1 x Refill für QuickFix Elastic	5512
mit 45 Pflastern	

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 5174

 PZN:
 10066365

 Maße:
 H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



# QuickSafe® FOOD INDUSTRY

### FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Mit relevantem Inhalt für den speziellen Bedarf in der Lebensmittelindustrie.



### SCHNELLE UND SICHERE HILFE

Eine Erste-Hilfe-Station für die Lebensmittelindustrie, Küchen, Kantinen und Restaurants u.a. mit detektierbaren Pflastern, Wundreinigung, Brandgel und Wundkompressen.

INHALT:	ArtNr.:
18 x QuickCool Brandgel	5150
1 x QuickStop Wundkompresse	5152
1 x 17 x 17 cm und 2 x 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean Wundreinigungstuch	5151
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
1 x Refill für QuickFix Detectable	5513
mit 45 Pflastern	
1 x Nachfüllung für QuickFix Detectable	5509
Long mit 30 Pflastern	
Verpackung:	1
ArtNr.:	5175

10181468

H: 430 x B: 253 x T: 92 mm

PZN:

Maße:



# QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

# STARKE LÖSUNG FÜR CHEMISCHE SUBSTANZEN

Unfälle mit Säuren/Alkali können schwerwiegende und lebenslange Folgen haben. Gehen Sie deshalb keine Kompromisse ein und schaffen Sie leichten Zugang zur Ersten Hilfe.



## LEICHTER ODER SCHWERER UNFALL – WENN SEKUNDEN DEN UNTERSCHIED MACHEN

Wenn die Gefahr von Unfällen mit Säuren oder Alkali besteht, ist es entscheidend, zur Sicherheit eine effektive Augenspülung bereitzustellen. Die Station enthält unter anderem Plum pH Neutral DUO, mit der beide Augen gleichzeitig gespült werden können.

INHALT:	ArtNr.:
1 x 500 ml Plum Augenspülung DUO	4861
1 x 500 ml Plum pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml Plum pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampu	ullen 5160
1 x Refill für QuickFix Elastic	5512
mit 45 Pflastern	

 Verpackung:
 1

 Art.-Nr.:
 5171

 PZN:
 10066359

 Maße:
 H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



# Wundversorgung

Praktische Lösungen
– mit denen Sie kleine Unfälle aufhalten, bevor Sie aufgehalten werden

Selbst kleine Schnitte und Wunden können zu einer ernsthaften Verletzung werden, wenn man sie nicht rechtzeitig behandelt. Mit der richtigen Wundversorgung können Sie kleine Wunden leicht reinigen und verbinden und schnell zurück an die Arbeit gehen.





### QUICKSTOP

Wundkompressen-Set für Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen. Steriler Verband mit integrierter Kompresse. Elastisch, nicht haftend und hautfreundlich. QuickStop für allgemeine Anwendung als Druck-, Stütz- und Schutzverband.

DAS SET UMFASST: 1 x Wundkompresse, 17 x 17 cm 2 x Wundkompressen, 12 x 7,5 cm

 Verpackung:
 6 x 3

 Art.-Nr.:
 5152

 PZN:
 10066313



### QUICKCOOL

Brandgel für die Erste Hilfe bei leichteren Verbrennungen und Verbrühungen. Kühlende und schmerzlindernde Wirkung. Enthält Teebaumöl. Einzeln und als Nachfüllung der QuickSafe® Stationen verwendbar. 18 Sachets pro Schachtel.

 Verpackung:
 6 x 18

 Art.-Nr.:
 5150

 PZN:
 10066299



### QUICKCLEAN

Wundreinigungstücher zur Reinigung kleinerer Wunden und Schnitte. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Einzeln und als Nachfüllung von QuickSafe® Stationen verwendbar. 20 Sachets pro Schachtel.

 Verpackung:
 6 x 20

 Art.-Nr.:
 5151

 PZN:
 10066307



### 50 ML / 250 ML WUND- UND AUGENSPRAY

0,9 % Natriumchloridlösung zur sofortigen Versorgung von kleineren Augenunfällen oder Schnitten und Kratzern.

 Inhalt:
 50 ml

 Verpackung:
 24 x 50 ml

 Art.-Nr.:
 45530

 PZN:
 14130060

 Sprachen:
 en, de, se, da, fr, no, fi, pt, it, nl, es, pl

 Inhalt:
 250 ml

 Verpackung:
 12 x 250 ml

 Art.-Nr.:
 4554

 PZN:
 13580861



### 200 ML WUND- UND AUGENSPRAY

0,9 % phosphatgepufferte Natriumchloridlösung, die Fremdkörper, Blut, geronnenes Blut und abgestorbenes Gewebe entfernt.

 Inhalt:
 200 ml

 Verpackung:
 12 x 200 ml

 Art.-Nr.:
 4556

 PZN:
 15587643

Plum Wund- und Augenspray ist gemäß Leitfaden zur Klassifizierung der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) mit der CE-Kennzeichnung versehen.



### ALOE VERA BRANDGEL

Brandgel auf Wasserbasis mit Aloe Vera. Zur Anwendung bei leichteren Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand und strahlenverletzter Haut. Kühlt und beruhigt schnell, lindert Schmerzen und beschleunigt den Heilungsprozess durch Befeuchtung. Tragen Sie das Gel unmittelbar nach einer thermischen Verletzung reichlich auf die betroffene Stelle auf.

 Inhalt:
 50 ml

 Verpackung:
 24 x 50 ml

 Art.-Nr.:
 5575

 PZN:
 15259100



### QUICKCLEAN WUNDREINIGUNG

Schachtel mit 40 Wundreinigungstüchern zur Reinigung kleinerer Wunden und Schnitte. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Jedes Tuch misst 130 x 200 mm.

 Verpackung:
 11 x 40

 Art.-Nr.:
 5551

 PZN:
 09534217

 Wandhalterung:
 955904





Laborgeräte - Glas - Reagenzien Mikrobiologie - Hygienekontrolle Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7 Email: office@labworld.at

